

Buran-2D Hüftgelenk



Ausstattung

Für **kleine** bis **große** Patienten

Gelenk aus **hochfestem Aluminium**

- + Die **Beckenrotation** (erweiterte Schrittlänge) für einen effizienten und energiesparenden Gang erfolgt über die Laufachse mit **20 Grad** Neigung
- + Die **von der Rotationsachse getrennte Sitzachse** verläuft horizontal und lässt einen maximalen Sitzwinkel **von 155 Grad** zu
- + Der **Pre-Selected Verschluss** ermöglicht ein zweistufiges Öffnen und Schließen
- + Mit dem **Druckknopf** wird der Verschluss entriegelt und über Durchstrecken der Hüfte zum Sitzen geöffnet.
- + Zum Aufrichten wird der **Verschluss vorgespannt** und schnappt bei voller Streckung selbständig ein.

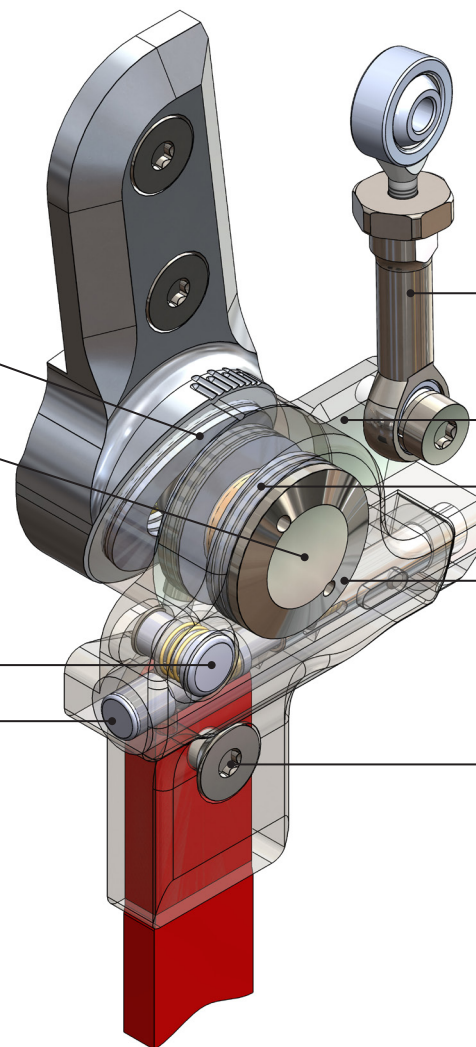


Abb. links

Basis

Komplett montiert als Einheit für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Beckengabel

Im Gang wird über die **verstellbaren Konnektoren** die Bewegung reziprok auf die gegenüberliegende Seite übertragen

Sehr stabile Verbindungsplatte aus Edelstahl

Montiert mit langlebigen Axialkränzen für eine leichte und spielfreie Achsführung


Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit Messingbuchse

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube


Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

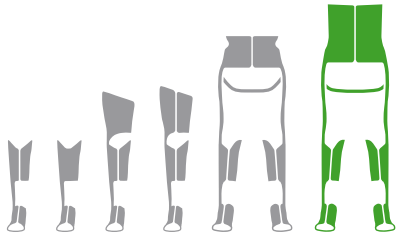


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

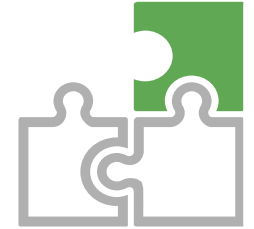

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Gelenk

Artikel-Nr.	RG0	Breite	Stärke	Höhe
Buran-2D-klein	bis 25 kg	36 mm	37,5 mm	131,5 mm
Buran-2D-mittel	bis 50 kg	36 mm	37,5 mm	138,5 mm
Buran-2D-groß	bis 65 kg	36 mm	37,5 mm	138,5 mm
Buran-2D-ex-groß	bis 85 kg	36 mm	37,5 mm	144,5 mm

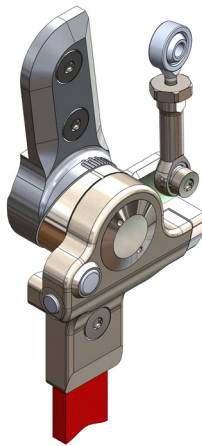


gesperrt




Extension



Flexion

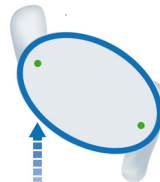

Schrittlänge

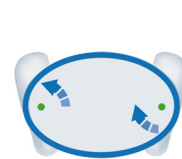

mit Beckenrotation

Abduktion



und Adduktion



kein Feilen nötig