

Fokus 1D Hüftgelenk



Ausstattung

Für **kleinste** bis **große** Patienten

Gelenkgabel aus **hochfestem Aluminium**

+ Das teilbegrenzte Hüftgelenk **verhindert die Ab- und Adduktion** und besitzt eine **erweiterbare Flexionsbewegung von 12 Grad** zur Schrittbegrenzung

+ **Die Flexionsbegrenzung** bei geöffnetem Gelenk von **90 Grad** kann erweitert werden.

+ Unterteil aus **hochfestem, gehärteten Stahl**

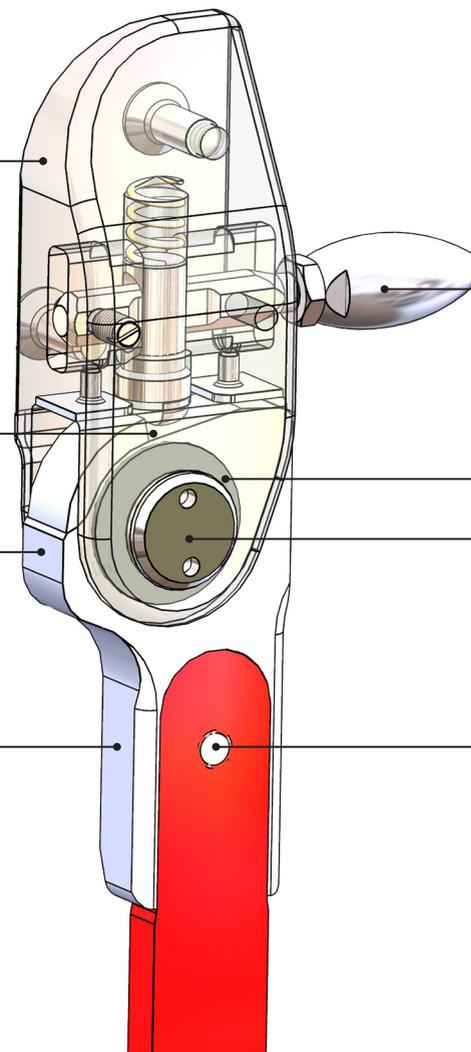


Abb. links

Basis

Komplett montiert als Einheit für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Beckengabel

Über den **Hebelmechanismus** wird das Gelenk wahlweise von hinten oder von vorne angebracht, zum Sitzen geöffnet. Verriegelt wird die Sitzachse bei Streckung durch die vorgespannte Sperrfeder.

Montiert mit selbstschmierenden Gelenkscheiben für eine leichte und spielfreie Achsführung


Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus hochfestem Stahl mit Messingbuchse

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube


Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

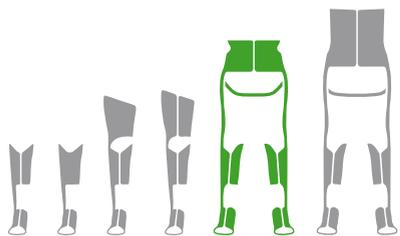


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

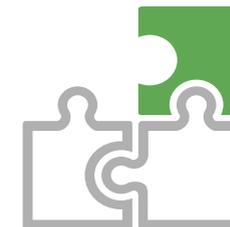

Gewichtsklassifizierung
(Körpergewicht)

| Artikel-Nr. | HKAFO | Gelenk | | |
|---------------------|-----------|--------|---------|----------|
| | | Breite | Stärke | Höhe |
| Fokus-1D-infant | bis 15 kg | 25 mm | 20,0 mm | 94,0 mm |
| Fokus-1D-klein | bis 20 kg | 30 mm | 23,0 mm | 112,5 mm |
| Fokus-1D-klein-Plus | bis 30 kg | 36 mm | 29,0 mm | 114,0 mm |
| Fokus-1D-mittel | bis 40 kg | 36 mm | 29,0 mm | 127,5 mm |
| Fokus-1D-groß | bis 60 kg | 36 mm | 29,0 mm | 127,5 mm |
| Fokus-1D-ex-groß | bis 85 kg | 45 mm | 36,0 mm | 151,0 mm |

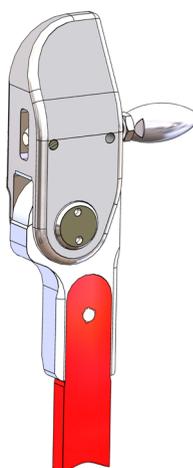

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| gesperrt | Extension | Flexion | Schrittlänge | mit Beckenrotation | Abduktion | und Adduktion | kein Feilen nötig |
|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|