

Revo-1D Hüftgelenk



Ausstattung

Für **kleinste** bis **große** Patienten
Gelenk aus **hochfestem Aluminium**

+ Der **Pre-Selected Verschluss** ermöglicht ein zweistufiges Öffnen und Schließen

+ Mit dem **Druckknopf** wird der Verschluss entriegelt und durch Durchstrecken der Hüfte zum Sitzen geöffnet. Zum Aufrichten wird der **Verschluss vorgespannt** und schnappt bei voller Streckung selbständig ein.

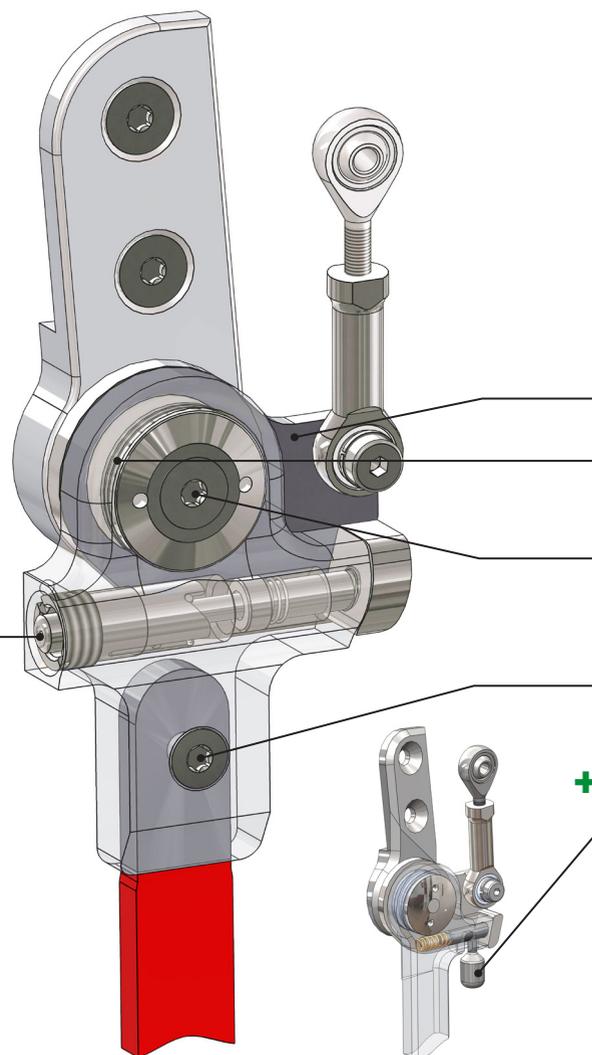


Abb. links

Basis

Komplett montiert als Einheit für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Beckengabel

Im Gang wird über die **Konnektoren** die Bewegung reziprok auf die gegenüberliegende Seite übertragen

Sehr stabile Verbindungsplatte aus Edelstahl

Montiert mit langlebigen Axialkränzen für eine leichte und spielfreie Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus hochfestem Stahl und Messingbuchse


Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube

+ **Das Revo-infant Gelenk** für die kleinen Patienten wird für mehr Sicherheit mit einem **Hebelverschluss** verschlossen


Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

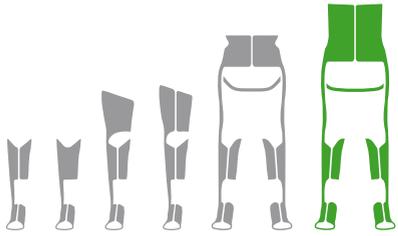


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

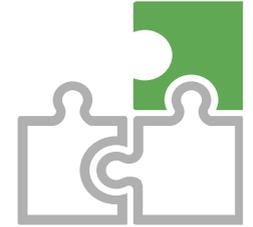

Gewichtsklassifizierung
(Körpergewicht)

Artikel-Nr.	RGO	Gelenk		
		Breite	Stärke	Höhe
Revo-1D-infant	bis 15 kg	28 mm	23,0 mm	91,0 mm
Revo-1D-klein	bis 25 kg	35 mm	28,0 mm	134,0 mm
Revo-1D-mittel	bis 50 kg	35 mm	28,0 mm	142,0 mm
Revo-1D-groß	bis 65 kg	35 mm	32,0 mm	142,0 mm
Revo-1D-ex-groß	bis 85 kg	35 mm	32,0 mm	144,0 mm

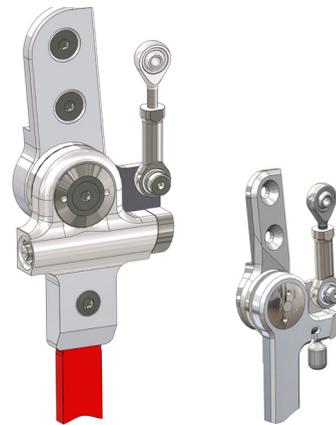

Revo-klein- bis ex-groß Revo-infant

gesperrt	Extension	Flexion	Schrittlänge	mit Beckenrotation	Abduktion	und Adduktion	kein Feilen nötig