

Revo-2D Hüftgelenk



Ausstattung

Für **kleinste** bis **große** Patienten
Gelenk aus **hochfestem Aluminium**

- + Die **Beckenrotation** (erweiterte Schrittlänge) für einen effizienten und energiesparenden Gang erfolgt über die Schrägstellung der Sitz- und Gehachse von je 7 Grad
- + Der **Pre-Selected Verschluss** ermöglicht ein zweistufiges Öffnen und Schließen
- + Mit dem **Druckknopf** wird der Verschluss entriegelt und durch Durchstrecken der Hüfte zum Sitzen geöffnet. Zum Aufrichten wird der **Verschluss vorgespannt** und schnappt bei voller Streckung selbständig ein.

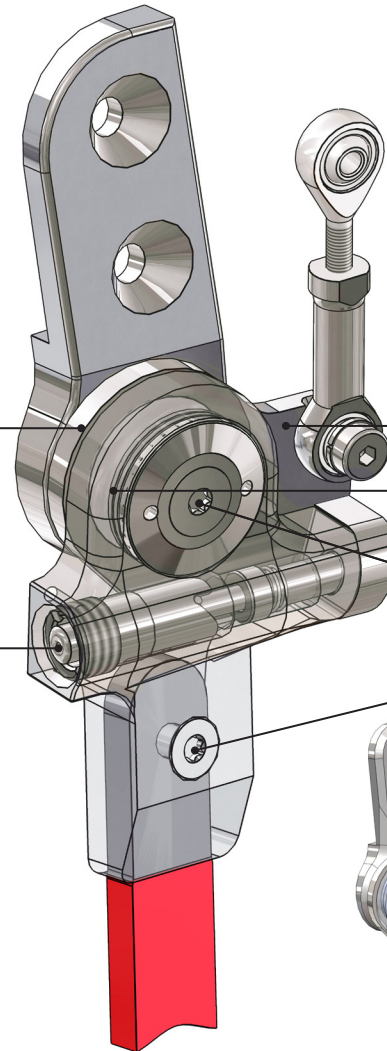


Abb. links

Basis

Komplett montiert als Einheit für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Beckengabel

Im Gang wird über die **Konnektoren** die Bewegung reziprok auf die gegenüberliegende Seite übertragen

Sehr stabile Verbindungsplatte aus Edelstahl

Montiert mit langlebigen Axialkränzen für eine leichte und spielfreie Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus hochfestem Stahl und Messingbuchse


Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube

- + Das **Revo-infant Gelenk** für die kleinen Patienten wird für mehr Sicherheit mit einem **Hebelverschluss** verschlossen


Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

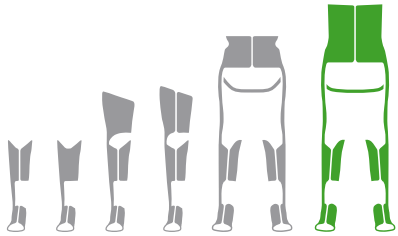


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

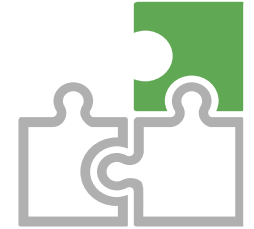

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr.	RG0
Revo-2D-infant	bis 15 kg
Revo-2D-klein	bis 25 kg
Revo-2D-mittel	bis 50 kg
Revo-2D-groß	bis 65 kg
Revo-2D-ex-groß	bis 85 kg

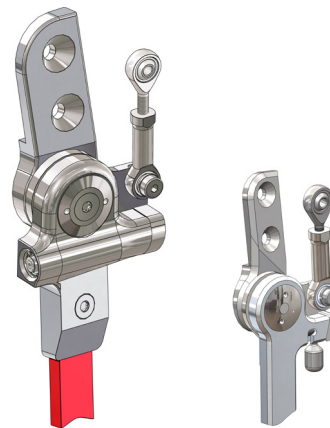

Revo-klein- bis ex-groß Revo-infant

Gelenk

Breite	Stärke	Höhe
28 mm	23,0 mm	91,0 mm
35 mm	28,0 mm	134,0 mm
35 mm	28,0 mm	142,0 mm
35 mm	32,0 mm	142,0 mm
35 mm	32,0 mm	144,0 mm




gesperrt



Extension



Flexion

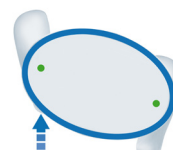

Schrittlänge



mit Beckenrotation

Abduktion



und Adduktion



kein Feilen nötig