

Konso-Move-N



Ausstattung

Mit **federndem Druckstück** zur optionalen temporären Öffnung der Sperre

+ **Die Krafteinheit** unterstützt das Kniegelenk in der Streckung und hilft während des Sitz- und Aufrichtvorgangs.

+ Durch Drehung **des Hebelknochens** kann von **95 bis 115 Grad Beugewinkelanschlag** variiert werden.

+ Durch Verändern **des Krafthebels** kann die Streckkraft über **7 Positionen** reduziert oder erhöht werden.

Gedämpfter Beugeanschlag

Unterschiedliche Kräfte verfügbar

Flache Basisaufnahme für nachträgliches Ergänzen
Zwei unterschiedliche Basisaufnahmen beim Kombiprodukt

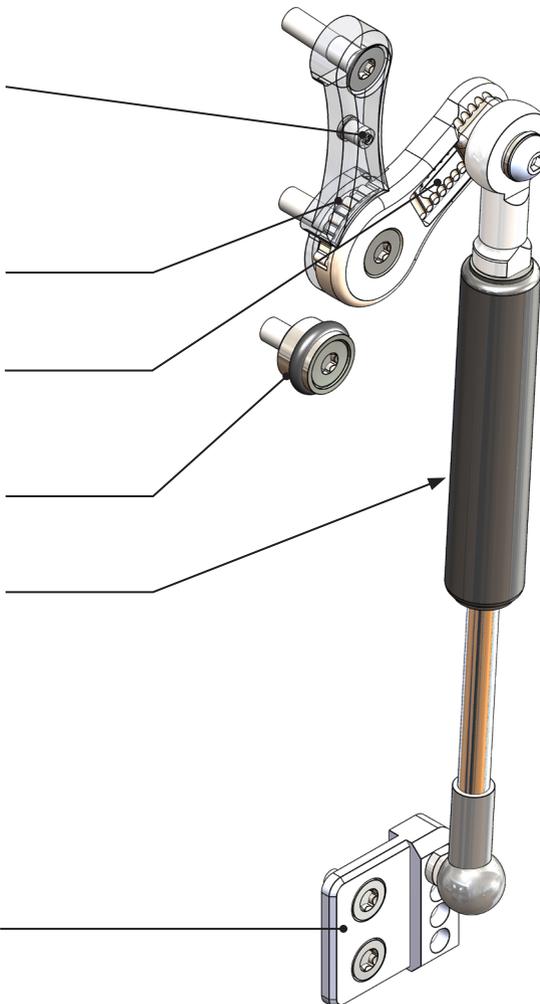


Abb. links


Basis

Komplett montiert mit allen benötigten Teilen als Funktionsergänzung für ein Konso Kniegelenk


Als Kombiprodukt mit einem Konso Kniegelenk für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung.

Nachverfolgbar durch **eigene Serien-Nummer**

Übersichtlich **bebilderte Gebrauchsanweisung**

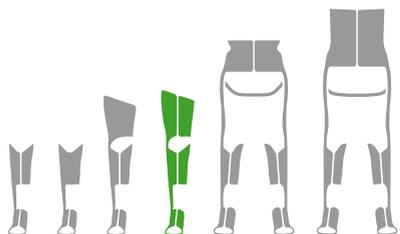


Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

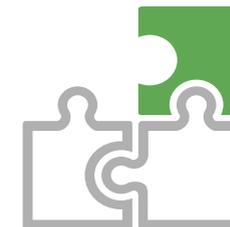

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr. Kombiprodukt	KAFO	Artikel-Nr.
Konso-Move-N-22	bis 20 kg	Move-N-22
Konso-Move-N-25	bis 30 kg	Move-N-25
Konso-Move-N-28	bis 35 kg	Move-N-28
Konso-Move-N-30	bis 50 kg	Move-N-30
Konso-Move-N-32	bis 70 kg	Move-N-32
Konso-Move-N-36	bis 85 kg	Move-N-36
Konso-Move-N-40	bis 85 kg	Move-N-40

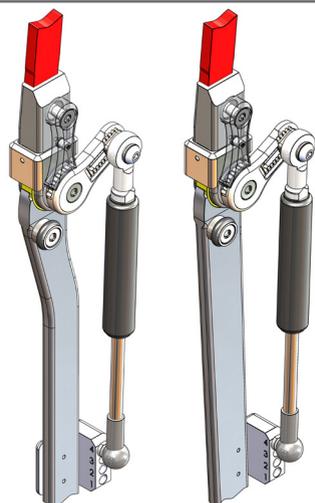

Konso mit Schwung | Konso gerade

gesperrt	Streckung in 30°	Beugung in 95° 105° 115°	rückverlagert	modular	Kraftunterstützung	kein Feilen nötig	geräuschgedämpft	wasserbeständig