

Konso-Move-S



Ausstattung

Mit **federndem Druckstück** zur optionalen temporären Öffnung der Sperre

+ **Die Krafteinheit** unterstützt das Kniegelenk in der Streckung und hilft während des Sitz- und Aufrichtvorgangs.

+ Durch Verändern **des Krafthebels** kann die Streckkraft über **3 Positionen** reduziert oder erhöht werden.

+ **Der Beugewinkelanschlag** beträgt für komfortables Sitzen **115 Grad**

Gedämpfter Beugeanschlag

Unterschiedliche Kräfte verfügbar

Flache Basisaufnahme für nachträgliches Ergänzen
Zwei unterschiedliche Basisaufnahmen beim Kombiprodukt

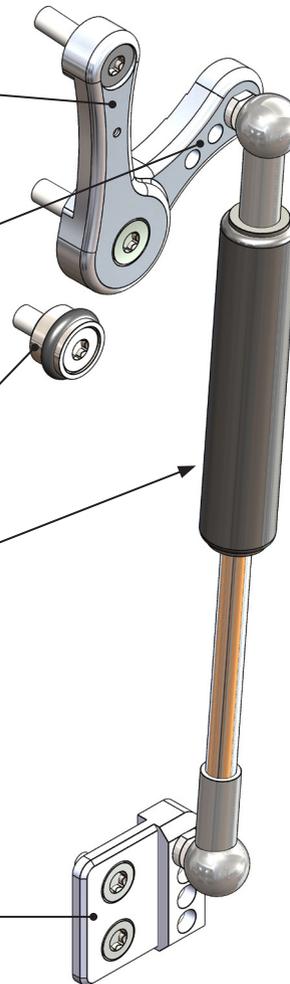


Abb. links


Basis

Komplett montiert mit allen benötigten Teilen als Funktionsergänzung für ein Konso Kniegelenk


Als Kombiprodukt mit einem Konso Kniegelenk für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung.

Nachverfolgbar durch **eigene Serien-Nummer**

Übersichtlich **bebilderte Gebrauchsanweisung**

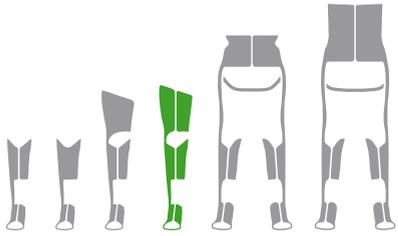

Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

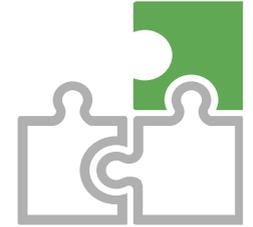

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr. Kombiprodukt		KAFO		Artikel-Nr.
Konso-Move-S-22		bis 20 kg		Move-S-22
Konso-Move-S-25		bis 30 kg		Move-S-25
Konso-Move-S-28		bis 35 kg		Move-S-28
Konso-Move-S-30		bis 50 kg		Move-S-30
Konso-Move-S-32		bis 70 kg		Move-S-32
Konso-Move-S-36		bis 85 kg		Move-S-36
Konso-Move-S-40		bis 85 kg		Move-S-40

Konso mit Schwung | Konso gerade

<p>gesperrt</p>	<p>30° Streckung in</p>	<p>115° Beugung in</p>	<p>rückverlagert</p>	<p>modular</p>	<p>Kraftunterstützung</p>	<p>kein Feilen nötig</p>	<p>geräuschgedämpft</p>	<p>wasserbeständig</p>
-----------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	----------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------