

Easy-T Knöchelgelenk



Ausstattung

Wasserfest für alle Anforderungen

- + Aktive Unterstützung während der **Standphase**
- + Aktive Unterstützung der **Fersenabrollung**
- + Sichere, fußhaltende Funktion in der **Schwungphase**
- + **Kräfte** in blau (leichte Kraft) und grün (kleine Kraft) oder nur **Bewegungsbegrenzer**

Geräuschdämmung für höhere Patientenakzeptanz

- + **Unabhängige Lotanpassung** von bis zu 10° nach vorne und 10° nach hinten

- + **Robuste Gelenkgabel aus hochfestem Titan**

Spiralfedern und Kugeln aus **robustem Edelstahl**

Bewegungsbegrenzung aus **Bronze**

Bis **17° Dorsalflexion** und **17° Plantarflexion**

Mehr Stabilität durch spezielle Kontur des Fußbügels

Befestigungspunkte für eine präzise Armierung

Auf Wunsch vorgebogen

Basis

Komplett montiert als Einheit für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

Mit **kurzem Anker oder langen Stabilitätsträger** zur Befestigung

Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel für mehr Stabilität

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube

Montiert mit selbstschmierenden und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

Wartungsfreie Gelenkverschraubung aus Edelstahl mit Bronzebuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**



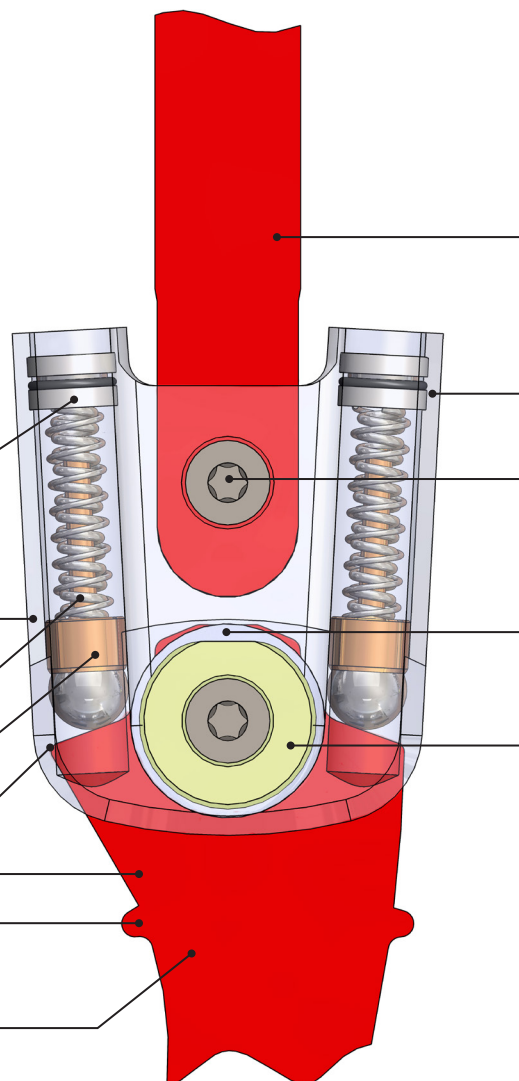


Abb. links

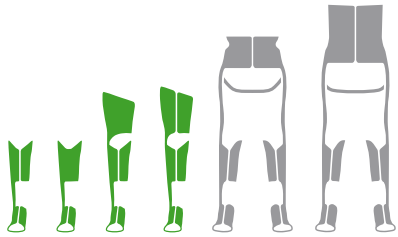



Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

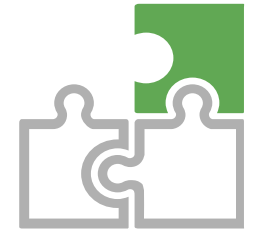

Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)


Gelenk

Artikel-Nr.	AFO/KAFO	für mehr Kraft	Breite	Stärke	Höhe
Easy-T-19	bis 10 kg	–	34 mm	9,0 mm	42 mm
Easy-T-22	bis 15 kg	bis 10 kg	39 mm	9,5 mm	46 mm
Easy-T-25	bis 25 kg	bis 15 kg	44 mm	11,5 mm	52 mm
Easy-T-28	bis 40 kg	bis 30 kg	49 mm	12,0 mm	58 mm
Easy-T-30	noch nicht verfügbar		–	–	–
Easy-T-32	noch nicht verfügbar		–	–	–
Easy-T-34	noch nicht verfügbar		–	–	–

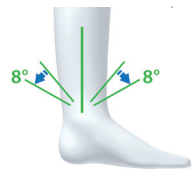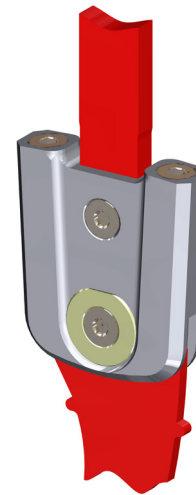


Lotaufbau

modular

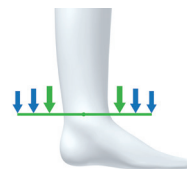

Kraftunterstützung

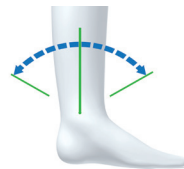

Bewegungs-
begrenzung



Schwungphase



Schnelle
Anpassung

Wechselkeil



kein Feilen nötig



Geräusch gedämpft



wasserbeständig