

# Ela-FI-Ex Knöchelgelenk



## Ausstattung

Für **kleine** bis **große** Patienten

Durch das Wechselkeilsystem **kein Feilen** notwendig

- + **fußhaltende Funktion** in der **Schwungphase**
- + **Aktive Unterstützung** in der **mittleren Standphase**
- + **Aktive Unterstützung** der **Fersenabrollung**

**Verschiedene Zugeinheiten** aus sehr robustem und langlebigem Material

**Schnelle Änderungen** der Bewegungsbegrenzung durch die Keilschublade


Gelenkgabel aus **hochfestem Aluminium**

Die gefrästen Winkel der Messingkeile garantieren eine **gleichbleibende Bewegungsbegrenzung** über die gesamte Tragdauer der Orthese

Bis **12° Dorsalflexion** und **12° Plantarflexion**

**Geräuschkämpfung** für höhere Patientenakzeptanz

**Hohe Steifigkeit** durch **Aluminium** Fußbügel

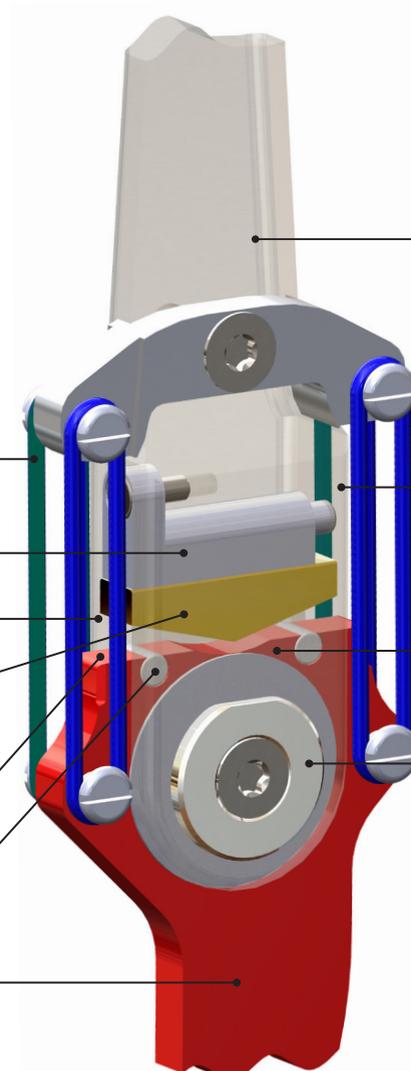

## Basis

**Komplett montiert** als Einheit für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag sowie eine schnelle und unkomplizierte Bestellung

**Optimale Kraftübertragung** zur Orthese mit integriertem Stabilitätsträger

**Aus einem Teil gefräste Gelenkgabel** für mehr Stabilität

**Montiert** mit selbstschmierenden und auf hundertstel Millimeter spielfrei abgestimmter Achsführung

**Wartungsfreie Gelenkverschraubung** aus Edelstahl mit Bronzebuchse

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

Abb. links




Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.  
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.



**Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)**

**Gelenk**

Artikel-Nr.	Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)		Gelenk
	AFO/KAFO	HKAFO/RGO	
Ela-FI-Ex-22	bis 15 kg	bis 15 kg	Breite: 40 mm, Stärke: 14,0 mm
Ela-FI-Ex-25	bis 25 kg	bis 25 kg	Breite: 44 mm, Stärke: 14,5 mm
Ela-FI-Ex-28	bis 35 kg	bis 35 kg	Breite: 47 mm, Stärke: 14,5 mm
Ela-FI-Ex-30	bis 50 kg	bis 50 kg	Breite: 55 mm, Stärke: 19,0 mm
Ela-FI-Ex-34	bis 70 kg	bis 65 kg	Breite: 58 mm, Stärke: 19,0 mm
Ela-FI-Ex-38	bis 85 kg	bis 85 kg	Breite: 68 mm, Stärke: 22,0 mm

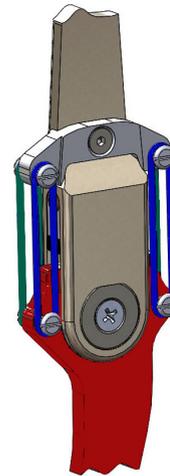

Lotaufbau	modular	Kraftunterstützung	Bewegungs- begrenzung	Schwungphase	Schnelle Anpassung	Wechselkeil	kein Feilen nötig	Geräusch gedämpft	wasserbeständig
-----------	---------	--------------------	--------------------------	--------------	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------